

 **EOGas[®]4**

más rápido que nunca.



STERILIZE IN UNDER
4
HOURS



*EOGas 4 cruza la barrera de las 4 horas
en esterilización 100% por óxido de etileno
con un concepto de ciclo corto
imposible hasta ahora*

Esterilización en menos de 4 horas

mas rápido que nunca

EOGas[®] 4

Aireación

Dos robustas bombas de ventilación y de purga logran niveles FDA de remoción de residuales.

Purificador De Exhosto

Conexión opcional para un purificador de gas, cuando las regulaciones de liberación de Oxido de Etileno lo requieran.

Proceso Automatizado

Tanto el sistema de auto-diagnostico como el estatus de esterilización son mostrados por el display digital.

Condiciones Controladas

La camara cuenta con una doble pared por la que circula aire caliente asistido por una unidad de ventilación alterna, garantizando una temperatura constante de 50 grados centígrados.



Esterilización en menos de 4 horas


Esterilice la mayor parte de sus elementos en 3.5 - 4 horas, incluyendo el tiempo de aireación.

Doble protección contra exposición


La nueva membrana plástica impermeable elimina el riesgo de exposición del operario a residuales de OE al abrir la puerta.

Mecanismo De Purga

que administra el gas dentro de la cámara plástica impermeable, para llevar a cabo una esterilización bajo parámetros FDA, y removiéndolo agresivamente para liberar el material de residuales.

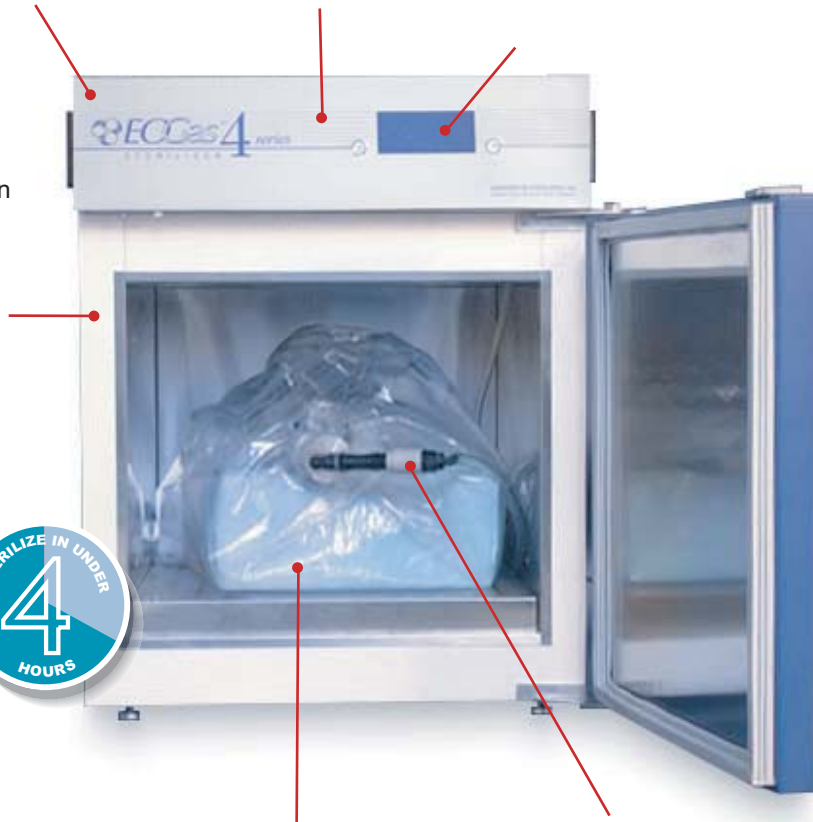

EO Gas 4 le permite ahora esterilizar en frío en menos de 4 horas por ciclo con su nuevo concepto de bolsa impermeable que minimiza los niveles de exposición mientras que optimiza la eficacia de la dosis de esterilización. El OE permanece en la bolsa durante todo el ciclo de esterilización, a

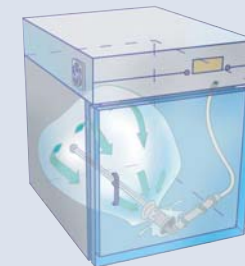

diferencia de la esterilización tradicional por gas, en la cual la cámara es inundada por OE.

Llame a:
800-523-1276
Visítenos:
www.anpro.com

Andersen Products, Inc.
Health Science Park • 3202 Caroline Dr.
Haw River, NC 27258-9564 USA
800-523-1276 • fax 336-376-8153

 **ANDERSEN PRODUCTS**
redefiniendo la esterilización

Exclusivamente para exportación.