


Alto desempeño y alta rentabilidad sin comprometer la seguridad del operario

Con EOGas 4 ahora es posible obtener niveles de esterilización SAL de 10^{-6} en 3 horas esterilizando 100% con óxido de etileno (OE), y utilizando menos del 80% de gas que cualquier esterilizador de otra marca.



► **EOGas 4 comparado con la cámara tradicional de óxido de etileno:**

- EOGas 4 usa *menos gas*, solo 18g. por ciclo, mientras que las cámaras tradicionales usan hasta 5 lbs. de OE por ciclo, alimentado por tanques externos.
- La cámara tradicional esteriliza con mezcla de gases inertes, mientras que EOGas usa 100% óxido de etileno.
- El sistema EOGas esteriliza y airea en la misma cámara. No se necesita transferir los productos a un área de aireación separada mientras que están liberando gas.

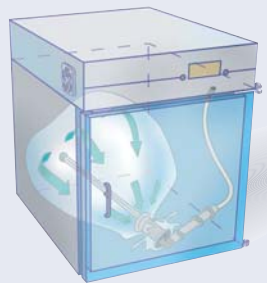


El sistema EOGas esteriliza y airea en la *misma cámara*. No necesita transferir productos a un área separada de aireación mientras hay liberación de gases.

► **EOGas 4 comparado con otros sistemas de esterilización de baja temperatura:**

- EOGas 4 tiene el *rango más amplio* de compatibilidad de materiales y productos (esterilizando de todo menos comida, líquidos o medicamentos).
- Habilidad de esterilizar *lumenes largos*, delgados y multi-canal. Con EOGas sí se pueden usar *indicadores biológicos confiables*.
- No existe el "*efecto sombra*". Todos los lados y superficies son esterilizados.
- Olvídense de los problemas con materiales de *empaque o alteración* de superficies.


Concentración de OE en EOGas 4 logrando nivel de esterilidad SAL (SAL) de 10^{-6}

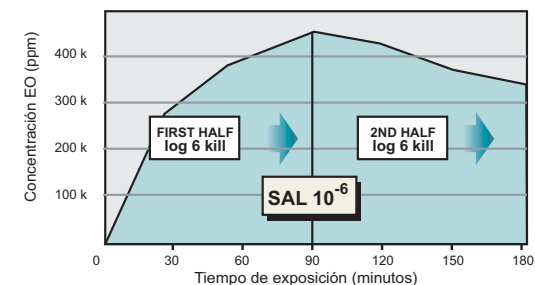

Visite: www.anpro.com/EOGas4


EOGas 4 vs. Sterrad:

Largo máximo recomendado para esterilizar un lumen de acero de 1mm .

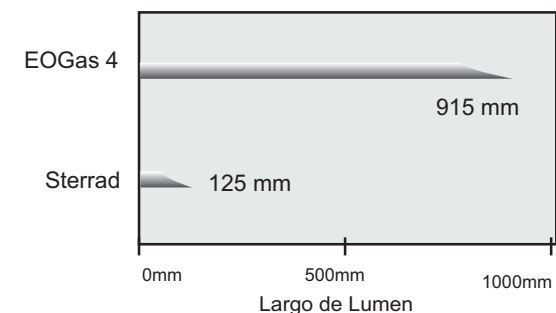

Para más información sobre el estudio comparativo de penetración de lumen www.anpro.com/eogas4

► Dimensiones

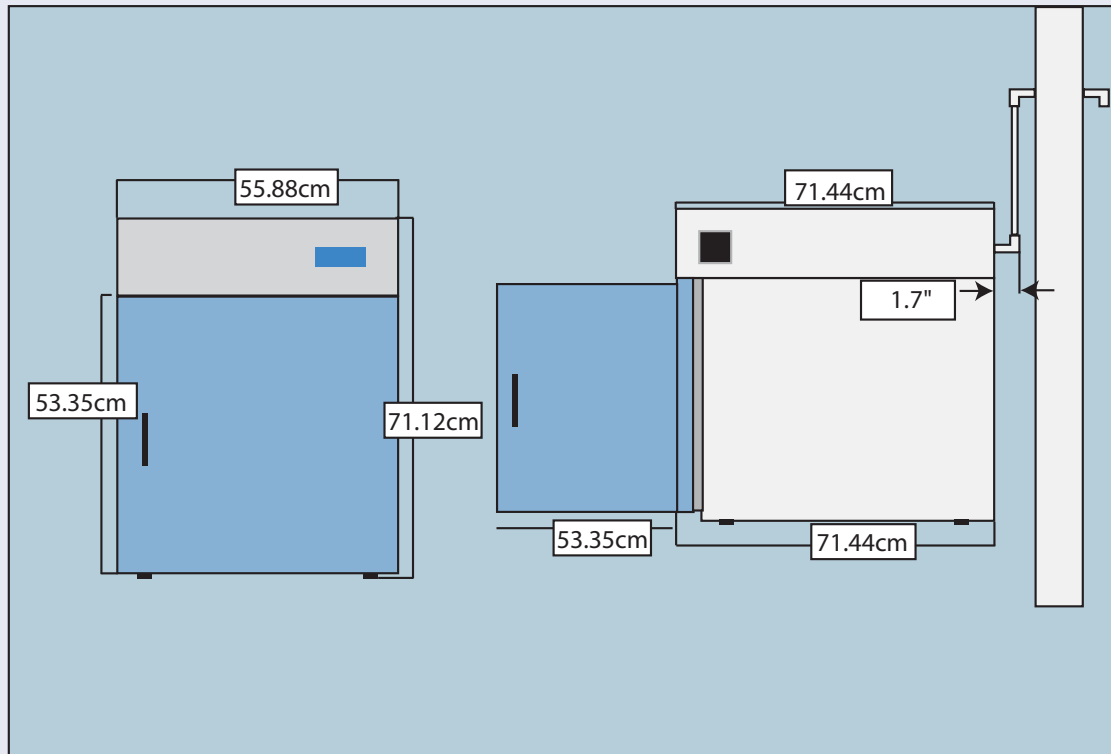

► Especificaciones y Accesorios

Modelos: AN4000.01, AN4000.11
 Dimensiones exteriores: 28'A, 22'L, 28.25'F
 Dimensiones Internas: 13.75'A, 18'L, 25.25'F
 Peso Total: 168 lbs.
 Corriente: 115+/-10%, 150 Watts, 230+/-10%, 150 Watts
 Manufacturado por: Andersen Sterilizers, Inc.
 Distribuido por: H.W. Andersen Products, Ltd.

Starter Kit:
 Cada kit incluye:
 25 Cartuchos (100% OE)
 25 humedecedores
 Humidichip
 25 EOGas Dosimeters
 25 membranas difusoras

► Apoyo Técnico



Entrenamiento y Certificación del Operario

Se ofrece entrenamiento gratuito para todos los operarios de EOGas. El entrenamiento se enfoca en preparación de instrumental, empaque, operación y seguridad.



Llame a:
800-523-1276
 Visitenos:
www.anpro.com

Andersen Products, Inc.
 Health Science Park
 3202 Caroline Drive
 Haw River, NC 27258-9564 USA
 800-523-1276 • fax 336-376-8153



Exclusivamente para exportación.